



- Реагенты в картриджах
- Калибраторы
- Контрольные материалы
- Промывочные растворы

Компания «Вектор-Бест» выпускает полную линейку наборов в картриджах для анализатора TAURUS



Многоуровневая система контроля производства наборов:


- входной контроль качества сырья
- контроль ОБТК каждой серии продукции
- стабильность наборов контролируется в течение всего срока годности

Качественные реагенты по ценам производителя:

- соответствуют международным требованиям: IFCC, DGKC, SFBC
- характеризуются высокой стабильностью и большим сроком годности
- имеют превосходные аналитические характеристики

Методология Six Sigma – показатель надежности аналитической системы

Оценка работы аналитической системы (анализатор TAURUS и реагенты «Вектор-Бест») $3 < \sigma < 6$ – хороший показатель, $\sigma > 6$ – отличный показатель (результаты установочной серии)

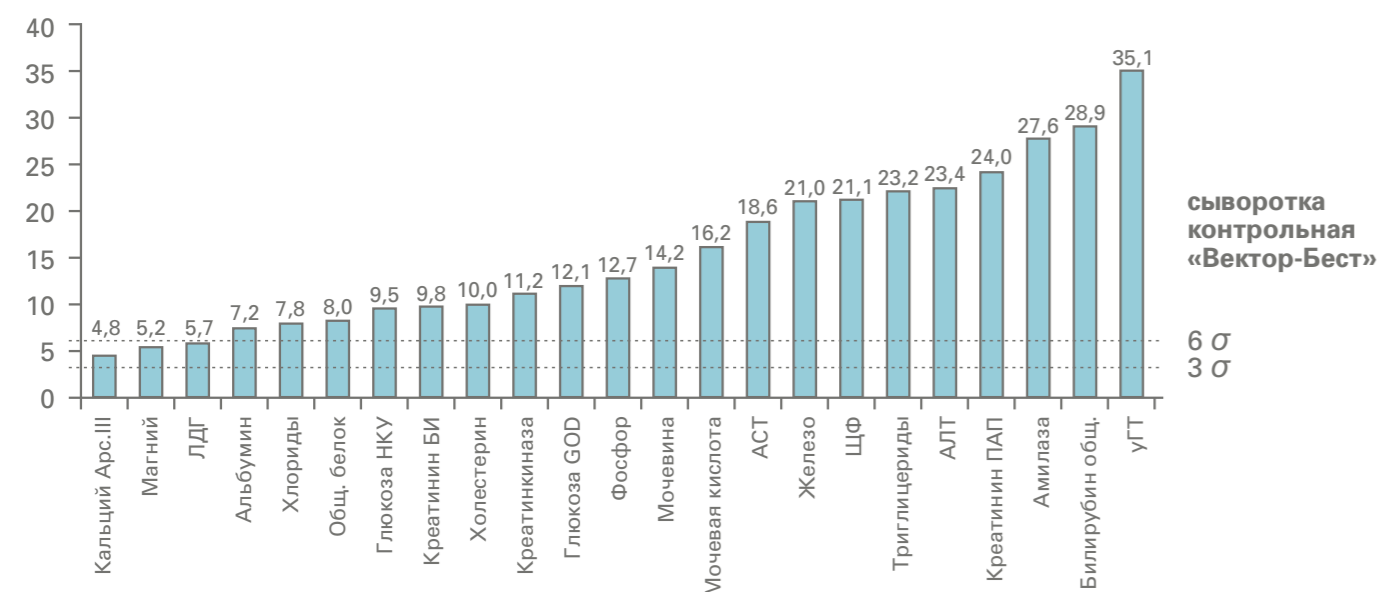

ЛИНЕЙКА НАБОРОВ В КАРТРИДЖАХ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА TAURUS

ФЕРМЕНТЫ

Амилаза общая
Амилаза панкреатическая
АЛТ
АСТ
Гамма-ГТ
Креатинкиназа общая
Креатинкиназа-МВ
ЛДГ
Щелочная фосфатаза

СУБСТРАТЫ

Альбумин
Общий белок
Билирубин общий
Билирубин конъюгированный
Глюкоза
Креатинин
Мочевая кислота
Мочевина

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Железо
Кальций
Магний
Фосфор
Хлориды

ЛИПИДЫ

Триглицериды
Холестерин общий



Оперативная
доставка
продукции



Сервисная
поддержка



Методическая
поддержка



ЗАО «Вектор-Бест»
630117, г. Новосибирск, а/я 492
тел./факс: (383) 227-73-60, 332-81-34
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

Москва: (495) 710-76-96

Санкт-Петербург: (812) 495-55-99

Ростов-на-Дону: (863) 295-15-61

Екатеринбург: (343) 372-90-50

Уфа: (347) 246-23-34

Нижний Новгород: (831) 270-48-53

Хабаровск: (4212) 335-946

Киев: (10 380 44) 220-04-04



Taurus

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
БИОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР



НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

500 тестов в час
875 тестов в час с ИСБ

Taurus

Современные технологии

Экономный расход реагентов

Компактный эргономичный дизайн

Модульная концепция: возможность объединения двух приборов

Многолетний опыт производства наборов для лабораторной диагностики и партнерство с изготовителями оборудования позволяют предложить Вам лучшие решения для эффективной организации биохимических исследований.



- единая платформа для выполнения срочных и рутинных анализов
- автоматический запуск прибора по таймеру
- автоматическая калибровка ISE модуля
- высокая скорость выполнения анализов
- не требует ручного ежедневного обслуживания

КОНТРОЛЬ ДОЗИРОВАНИЯ

- Уникальный дизайн иглы пробоотборника для максимально точного дозирования
- Детектор уровня жидкости
- Датчик обнаружения сгустка: автоматическая промывка пробоотборника и запуск повторного анализа
- Датчик защиты иглы от столкновения



РЕАГЕНТЫ СИСТЕМА «non-stop»

- 96 позиций для реагентов + ISE
- Более 300 методик
- Добавление реагентов в процессе работы прибора
- Возможность дополнительной калибровки без остановки анализатора
- Определение исходного оптического уровня реагентов с автоматической поправкой результатов исследования
- Мониторинг расхода реагентов, отслеживание срока годности

ИНТЕРФЕЙС



- Дружественный интерфейс
- Запуск основных функций нажатием одной клавиши
- Индивидуальная настройка главного меню
- Маркировка информационных сообщений цветом для быстрого отслеживания состояния системы
- Двусторонняя связь с ЛИС
- Возможность выбора формы отчета



БЕЗУПРЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Автоматическая проверка чистоты кювет перед анализом
- Использование дифракционной решетки для повышения точности измерения
- Отслеживание кинетики реакции
- Многоуровневый контроль качества: правила Вестгарда, создание контрольных карт



ОБРАЗЦЫ СИСТЕМА «non-stop»

- Непрерывная загрузка образцов: на борту прибора может находиться до 100 образцов одновременно
- Чашки образца и первичные пробирки могут использоваться без адаптеров
- Моментальная доступность образца после выполнения анализа
- Возможность анализа срочных образцов
- Тестирование до 5 различных типов биологических материалов

Ilab Taurus – воплощение инновационных технологий и высокой производительности!